




## Руководство пользователя

### МАССАЖНАЯ НАКИДКА POWER FULL REST

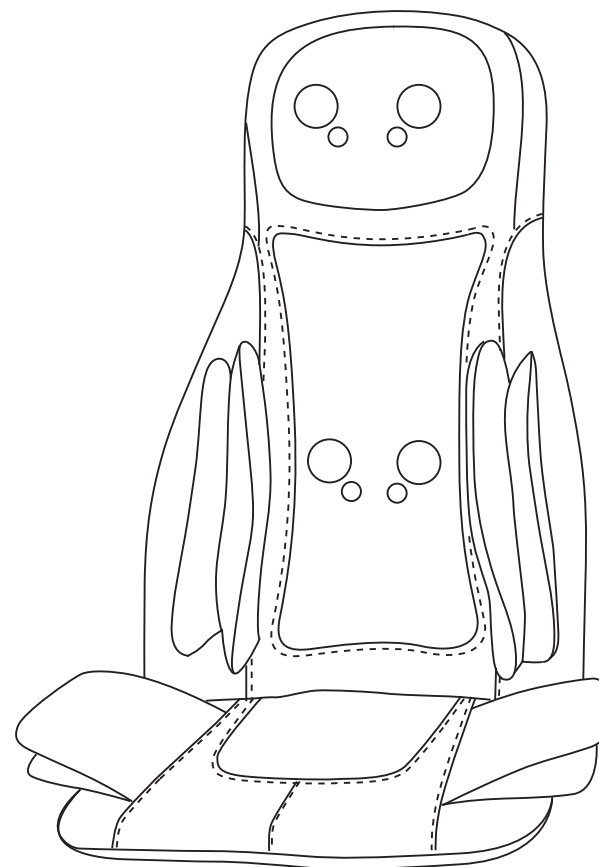

## ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Для обеспечения максимального срока службы изделия не роняйте, не выбрасывайте и не мните его. Не подвергайте его воздействию влаги, пыли или эксплуатации на открытом воздухе.

**Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство пользователя перед использованием, чтобы обеспечить правильную установку и эксплуатацию. Сохраните данное РУКОВОДСТВО пользователя надлежащим образом для дальнейшего использования.**

### ОПАСНО!

Для снижения риска поражения электрическим током, ожогов, пожара или травм:

1. Всегда отключайте этот массажер от электрической розетки сразу после использования и перед чисткой.
2. Не используйте устройство во время купания или в душе.
3. Не ставьте и не храните устройство там, где оно может упасть, в том числе в ванну или раковину.
4. Не помещайте и не роняйте устройство в воду или другую жидкость.
5. Не касайтесь устройства, упавшего в воду. Немедленно отключите его от сети.
6. Следите за тем, чтобы устройство не падало, и на него не попадала жидкость.
7. Никогда не используйте шурупы или другие металлические крепежные элементы при работе с данным устройством.
8. Внимательно осматривайте покрытие перед каждым использованием. Не используйте устройство при появлении каких-либо признаков износа, таких как растрескивание или образование пузырей.
9. Храните в сухом месте – не используйте во влажной среде.
10. Не подключайте и не отсоединяйте вилку питания мокрыми руками от электрической розетки.


## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

1. При использовании или нахождении рядом данного устройства с детьми, инвалидами или лицами с ограниченными физическими возможностями необходим тщательный надзор.
2. Нельзя оставлять включенное в розетку устройство без присмотра. Отключайте устройство от сети, когда оно не используется.
3. Используйте данное изделие только по назначению, как описано в данном руководстве. Не используйте насадки, не рекомендованные производителем.
4. Только для использования взрослыми.
5. Проконсультируйтесь со своим врачом перед использованием данного изделия.
6. Данное устройство не предназначено для самостоятельного лечения состояний, которые должны контролироваться квалифицированным медицинским работником.
7. Не используйте устройство, если вы плохо себя чувствуете.
8. Массажер предназначен для непрофессионального массажа, чтобы успокоить уставшие и ноющие мышцы. Устройство не предназначено для замены медицинской помощи. Если ваши недомогания и симптомы сохраняются или ухудшаются после использования, немедленно обратитесь к своему врачу.
9. Не используйте массажер в сочетании с другим терапевтическим оборудованием, электрическим одеялом и т.д., так как это может привести к неэффективности или травме.
10. Отключайте массажер от сети во время грозы.
11. Никогда не роняйте и не вставляйте какие-либо предметы в отверстия устройства.
12. Не наступайте и не заземляйте шнур питания, особенно у розетки и места выхода из устройства.
13. Держите шнур подальше от нагретых поверхностей. При хранении неплотно оберните шнур вокруг устройства. Если шнур питания устройства поврежден, не пытайтесь починить его самостоятельно.

## РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ

### Массажный блок


1. Массажные ролики с нагревом в зоне шеи
2. Воздушно-компрессионные подушки в зоне талии
3. Массажные ролики с нагревом в зоне спины
4. Ремень для крепления массажной накидки к стулу/креслу и ремень для хранения
5. Вибрация сиденья
6. Воздушно-компрессионные подушки в зоне ягодиц
7. Воздушно-компрессионные подушки в зоне бедер
8. Шнур питания
9. Пульт дистанционного управления
10. Адаптер питания
11. Карман для пульта дистанционного управления

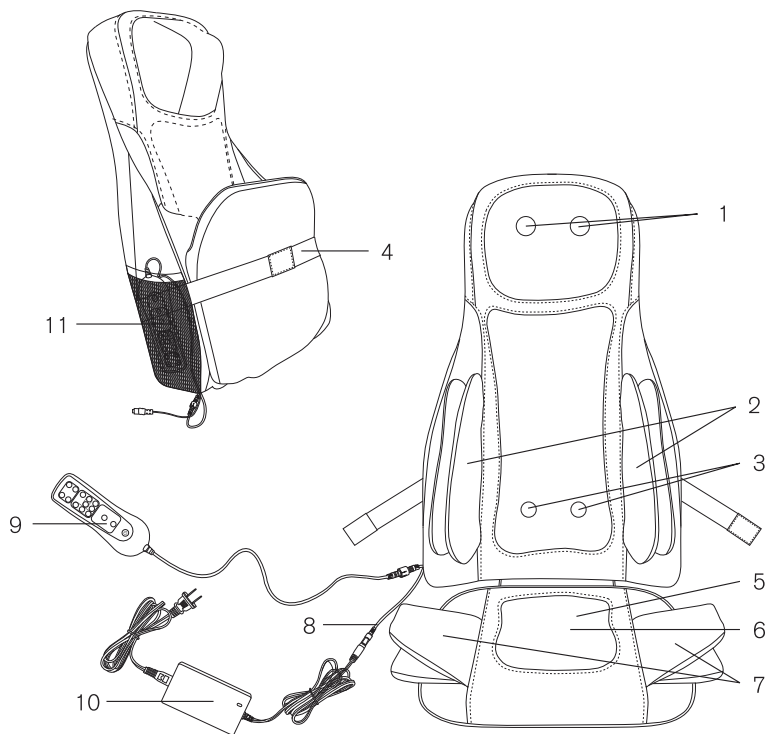

## РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ

### ШЕЯ

1. ▲ / ▼ Кнопки управления положением массажных роликов  
Продолжительное нажатие этих кнопок позволяет вручную регулировать высоту положения массажных роликов (вверх/вниз).
2. ⌚ / ⌚ Кнопки управления направлением движения массажных роликов.  
⌚ Нажмите один раз, чтобы начать, нажмите второй раз, чтобы изменить направление.  
⌚ Нажмите, чтобы запустить программу автоматического реверсирования (изменения направления движения роликов).

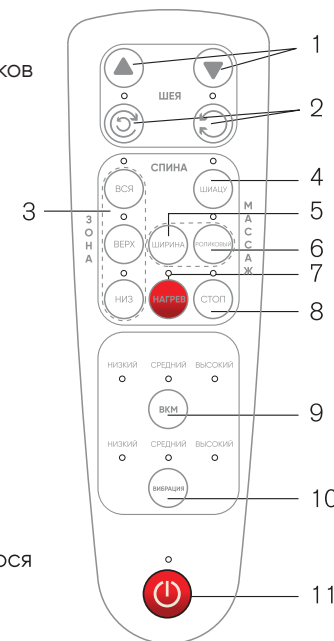

### СПИНА


3. **Зона массажа спины**  
Вся – массаж всей спины  
Верх – массаж верхней части спины  
Низ – массаж нижней части спины
4. **Шиацу**  
Для включения/выключения катающегося, вращающегося массажа.  
Примечание: Не работает с кнопкой Ширина.
5. **Ширина**  
Для регулировки ширины между роликами во время роликового массажа
6. **Роликовый**  
Для включения/выключения плавного массажа с равномерными вращательными движениями вверх-вниз. Используйте кнопку Ширина для выбора ширины между роликами.
7. **Нагрев**  
Для включения/ выключения мягкого нагрева в области точек шеи и спины.
8. **Стоп**  
Чтобы остановить и сфокусировать двигающиеся массажные ролики в нужном положении
9. **ВКМ** – воздушно-компрессионный массаж  
Для активации функции воздушно-компрессионного массажа в поясничном отделе, на бедрах, ягодицах и талии. Можно выбрать 3 уровня воздействия (низкий, средний, высокий).
10. **Вибрация**  
Для активации программы вибрационного массажа в зоне ягодиц. Можно выбрать 3 уровня воздействия (низкий, средний, высокий).
11. **Кнопка Включение/выключение**  
Кнопка включения/ выключения должна быть включена для работы любой функции. Отключение питания во время работы приведет к возвращению роликов в исходное положение.

## БЕЗОПАСНОСТЬ

1. Никогда не оставляйте устройство без присмотра, особенно в присутствии детей.
2. Никогда не накрывайте устройство во время его работы.
3. Не используйте данное устройство более 20 минут за один раз.
4. Слишком долгое использование может привести к чрезмерному нагреву, что сократит срок службы данного устройства. Если это произойдет, прекратите использование и дайте устройству остыть перед началом работы.
5. Никогда не используйте данное устройство непосредственно на опухших / воспаленных участках кожи или на участках кожных высыпаний. Не используйте при наличии необъяснимых болей в спине.
6. Это устройство для непрофессионального использования, предназначенное для проведения успокаивающего массажа мышц. Не используйте в качестве замены медицинской помощи.
7. Не используйте в кровати.
8. Данное устройство ни в коем случае не должно использоваться лицами, страдающими каким-либо физическим недугом, который ограничил бы способность пользователя управлять элементами управления.
9. Сильная жара или холод могут привести к повреждению устройства.
10. Когда устройство не используется, храните его в безопасном, прохладном и сухом месте.
11. Не погружайте устройство в жидкость.

## РАСПАКОВКА

1. Раскройте коробку с массажной накидкой, убедитесь, что все детали на месте.
2. Расстегните ремешок для хранения, отделив липучку.

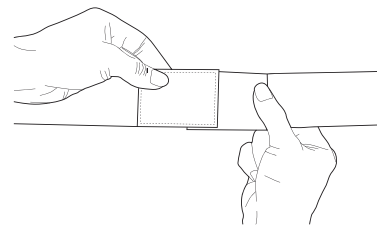


3. Если вы не используете массажную накидку и хотите хранить ее, используйте ремень, чтобы сложить сиденье и закрепить его (как при первом открытии коробки).

## ПОДГОТОВКА ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

1. Установите массажную накидку на прочный стул/кресло или диван. При желании вы можете прикрепить изделие к креслу ремнем. Вставьте адаптер питания в шнур питания. Вставляйте до щелчка.
2. Вставьте вилку адаптера питания в электрическую розетку переменного тока напряжением 120 В 60 Гц.
3. Нажмите кнопку питания на пульте дистанционного управления, чтобы включить и выключить устройство.

## МАССАЖ

1. Выберите и комбинируйте программы массажа шеи и спины в соответствии с вашими предпочтениями.
2. Начнутся выбранные программы массажа.
3. Во время работы вы можете регулировать ширину роликов, положение шеи, параметры роликов. Активируйте нагрев и т.д. в зависимости от выбранных программ массажа.
4. После завершения массажа ролики вернутся в исходное положение.
5. Вынимайте вилку из розетки, когда устройство не используется.

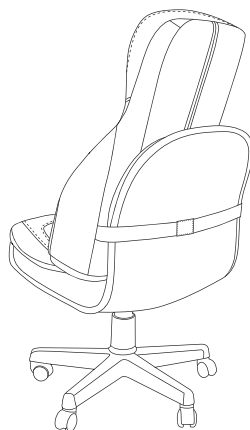

**Примечание:** Устройство автоматически выключается через 15 минут.

## УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- После использования протрите пыль и грязь с изделия сухой мягкой тканью.
- Держите изделие в чистоте и вдали от мест с повышенной влажностью.

## УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Проблема	Возможная причина / решение
Звук трения роликов о крышку спинки. Звук двигателя во время работы.	Эти звуки являются результатом механической конструкции, а не неисправности. Это может произойти во время нормальной работы.
Массажная накидка не включается.	Убедитесь, что питание включено. Убедитесь, что вилка сетевого шнура надежно подключена к электрической розетке. Убедитесь, что адаптер питания надежно подсоединен к шнуру питания. Убедитесь, что напряжение в электрической розетке достаточное. После длительного использования электродвигателю изделия может потребоваться время остыть. Пожалуйста, подождите 30 минут перед повторным использованием.
Массажные ролики останавливаются во время сеанса массажа.	Роликовый механизм может остановиться при воздействии чрезмерной силы. Ослабьте давление на ролики.
Лампочки с подогревом на массажных точках неожиданно погасли после длительного использования.	Лампы с подогревом имеют встроенную функцию безопасности для предотвращения перегрева. После длительного использования функция безопасности выключит лампы, позволяя им остыть примерно в течение 5 минут. Лампы автоматически включатся снова, когда эксплуатация станет безопасной.

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование .....	Массажная накидка Askona Perfomance Power Full Rest
Модель .....	FR-C19C
Номинальное напряжение .....	DC 12В 5А
Потребляемая мощность .....	60 Вт
Частота питания адаптера.....	50/60 Гц
Автоматический таймер .....	15 мин
Размер упаковки.....	81x24x50 см
Вес .....	7 кг (нетто) / 9 кг (брутто)
Комплектация.....	изделие, контроллер, адаптер питания, инструкция
Гарантия.....	12 месяцев